


# Насадка для зубної щітки Xiaomi El.Toothbr. T700 Repl.Heads Посібник користувача

## Встановлення насадки

Прикріпіть головку зубної щітки до ручки зубної щітки і перевірте, чи між двома деталями зубної щітки є певний проміжок. (Проміжок необхідний для того, щоб головка зубної щітки не зіштовхувалася з ручкою зубної щітки під час високочастотної вібрації та двигун працював на повну потужність).

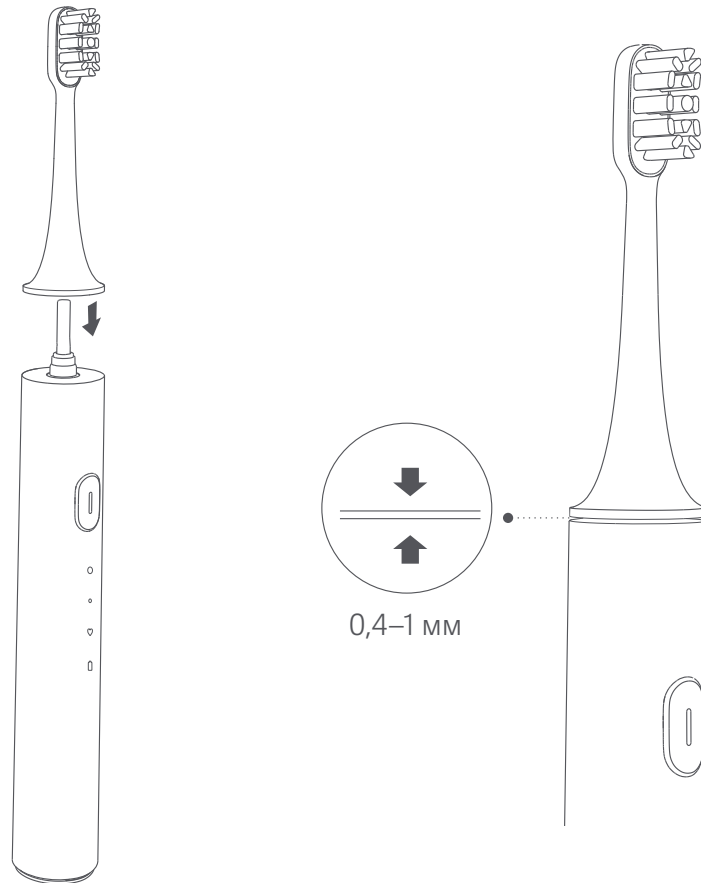

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

### ⚠ Примітка.

При першому використанні може відчуватися свербіж або спостерігатися слабка кровотеча. Це пов'язано з тим, що ваші ясна ще не звикли до настільки ефективного чищення. Рекомендується використовувати режим налаштування. Як правило, ці симптоми зникають протягом 1-2 тижнів. Якщо вони не зникнуть через 2 тижні, припиніть користуватися зубною щіткою і зверніться до стоматолога.

### \* Попередження

1. Користувачі, яким встановлений внутрішньощелепний зубний імплантат або які отримують стоматологічну допомогу з лікування зубів, деформацій зубів та щелеп, повинні користуватися виробом з урахуванням рекомендацій стоматологів.
2. Зубна щітка Mi Electric Toothbrush відповідає стандартам безпеки для електромагнітних пристроїв. У разі виникнення сумнівів щодо кардіостимулятора або інших імплантованих пристроїв, проконсультуйтеся перед використанням цього виробу з лікарями або виробниками імплантованих пристроїв.
3. Цей виріб призначений для чищення зубів, ясен та язика. Використовуйте виріб за призначенням. У разі виникнення болю або дискомфорту негайно припиніть використання цього виробу та зверніться до лікаря.

### \* Заборони та недопущення

1. Не занурюйте зарядну станцію у воду або будь-яку іншу рідину.
2. Після чищення перевірте, чи контакти живлення повністю сухі, а потім підключіть штепсель до джерела живлення.
- 3 Цей виріб містить вбудовані батареї, що перезаряджаються. Не кидайте виріб у вогонь, не заряджайте, не використовуйте та не розміщуйте його у місцях з високою температурою.
4. Не намагайтеся самостійно модифікувати, розбирати чи ремонтувати виріб.

### \*Важливі примітки

1. еред використанням перевірте виріб на наявність пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено або розбито, не використовуйте його.
2. Перед підключенням до джерела живлення перевірте, чи він відповідає напругі, на яку розраховано виріб.
3. Якщо зарядна станція пошкоджена, не використовуйте її.
4. Якщо зарядна станція пошкоджена, не використовуйте її.
5. Не використовуйте зарядну станцію в умовах високої температури (не піддавайте прямих сонячних променів).
6. Не використовуйте зубну щітку під час купання у ванній та під душем.

### \* Поради

1. Не допускайте загального користування голівкою зубної щітки разом із іншими людьми.
2. Не підключайте шнур живлення до зарядної станції під час підключення до джерела живлення.
3. Не ставте металеві предмети на підключену до джерела живлення зарядну станцію.